


PATIENT INSTRUCTIONS

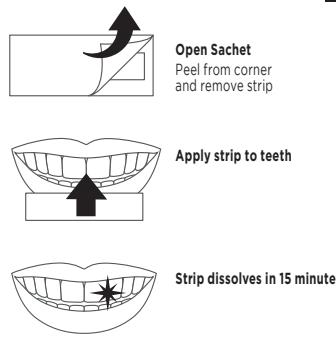

Instruction for use:

1. Use strip immediately after opening foil sachet
2. Remove the strip and apply either side of the strip to upper teeth.
3. Align the edge of the strip with the gum line and press the strip in place.
4. Repeat for lower teeth.
5. The strips will dissolve gradually leaving no residue.
6. Use once or twice daily as required

Recommended Wear Time:

The whitening strip will dissolve in around 15 minutes

Precautions

1. Pregnant and breastfeeding women should consult their physician before using whitening strips.
2. Keep out of direct heat/sunlight. Do not freeze.
3. Tooth fillings and crowns do not respond to tooth bleaching
4. Do not use tobacco products while bleaching
5. If you have any questions regarding the appropriate use of this product, please consult your dentist as soon as possible.
6. Contains Hydrogen Peroxide

Storage temperature 5 - 25°C

EN.1



UK RP: MDSS Ltd. 6 Wilmslow Road, Rusholme, Manchester M14 5TP, UK
EU RP: MDSS GmbH - Schiffgraben 41, 30175 Hanover, Germany



PROFESSIONAL DISSOLVABLE WHITENING STRIP

INSTRUCTIONS FOR USE

DISTRIBUTED BY:
Opident Ltd
Valley Drive, Ilkley, West Yorkshire, LS29 8AL
Tel: +44 (0) 1943 605 050
Email: sales@opident.co.uk
Website: https://www.opident.co.uk

MADE IN UK
REF: WDBSTRIPUK
S1 REV: 09/22

PL: System wybielania z bów
NO: Tannblekningssystem
FR: Système de blanchiment des dents
NL: Tandbleekingsysteem
IT: Sistema di sbiancamento dei denti
ES: Sistema de blanqueamiento dental
AR: ناس الـ سـيـنـيـهـ بـتـ

Warnings


- To be only sold to dental practitioners.
For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use
Products containing peroxides are not recommended for use by children under 18 years of age.
Warnings: If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult a dentist. Use of product for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist.
Avoid swallowing the strip or part thereof.
Avoid contact of the product with the eye.
Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow.

EN.4

WARNING
H315: Causes skin irritation.
H317: May cause an allergic skin reaction.
H318: Causes serious eye damage.
H226: Flammable liquid and vapour.
H400: Very toxic to aquatic life.
H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects.

EN.6

PATIENTEN-ANWEISUNGEN

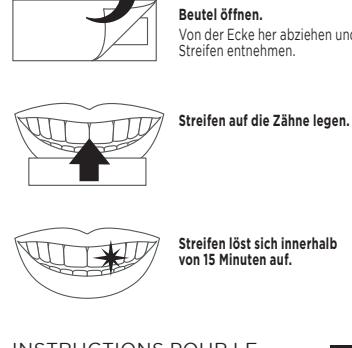

Gebrauchsleitung:

1. Streifen unmittelbar nach Öffnen des Folienbeutels verwenden.
2. Streifen entnehmen und eine Seite des Streifens auf die obere Zahnhälfte aufbringen.
3. Den Streifenrand auf den Zahnhalsrand ausrichten und andrücken.
4. Für die untere Zahnhälfte wiederholen.
5. Die Streifen lösen sich allmählich auf und hinterlassen keinen Rückstand.
6. Nach Bedarf ein- oder zweimal täglich verwenden.

Empfohlene Anwendungsdauer:

Der Aufhellungsstreifen löst sich in rund 15 Minuten auf.

White Dental Beauty Zahnaufhellungstreifen

White Dental Beauty Streifen sind ein Zahnaufhellungssystem zur Anwendung zu Hause in Form auflösbarer Aufhellungstreifen.

DE.2

White Dental Beauty - 6% HP-Equivalent

Inhaltsstoffe: Pektin, PVP, Glycerin, Wasserstoffperoxid, Wasser, Aroma (Pfefferminze), Pentanatriumtriphosphat, Natriumhexametaphosphat, Polysorbit 80, Sucralose, Limonen, Linalool, Citronellol

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schwangere und Stillende sollten sich vor Gebrauch der Aufhellungstreifen mit ihrem Arzt besprechen.
2. Vor direkter Wärme/Sonneneinstrahlung schützen. Nicht tiefgefrieren.
3. Zahnfüllungen und Kronen bleiben von der Zahnaufhellung unbeeinflusst.
4. Konsumieren Sie während der Zahnaufhellung keine Tabakerzeugnisse.
5. Bei Fragen zur ordnungsgemäßen Anwendung dieses Produkts, wenden Sie sich bitte baldmöglichst an Ihren Zahnarzt.
6. Enthält Wasserstoffperoxid.

Lagertemperatur 5 - 25 °C

DE.3

Warnhinweise


Verkauf nur an Zahnärzte und zahnärztliches Fachpersonal. Für jeden Anwendungszyklus muss die erste Anwendung von einem bzw. einer Zahnärztin oder einer zahnärztlichen Fachperson oder unter deren direkten Aufsicht erfolgen, damit ein entsprechendes Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach sind die Streifen dem Verbraucher zu geben, um den Anwendungszyklus abzuschließen. Die Verwendung peroxidhaltiger Produkte ist für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren nicht empfohlen. Warnhinweise: Bei Reizungen (z. B. Rötung, Schwellung, Wundsein) des Zahnhalses oder der Mundhöhle die Anwendung abbrechen und einen Zahnarzt aufsuchen. Die Anwendung des Produkts über einen Zeitraum von mehr als 14 Tagen sollte nur unter Aufsicht eines Zahnarztes erfolgen. Den Streifen, auch teilweise, nicht schlucken. Kontakt des Produkts mit den Augen vermeiden. Direkten Kontakt der aktiven Oberfläche des Zahnaufhellungsprodukts mit Zahnhals und/oder Speichelfluss vermeiden.

WANRUNG

H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411: Giftig für Wasserorganismen mit angfristiger Wirkung.

DE.4

INSTRUCTIONS POUR LE PATIENT

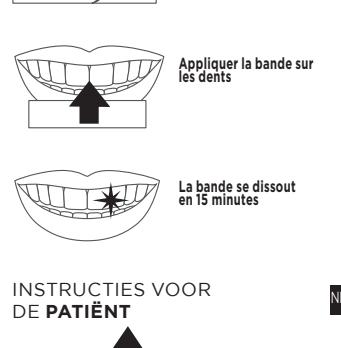

Mode d'emploi :

1. Utiliser la bande immédiatement après l'ouverture du film d'emballage.
2. Retirer la bande et appliquer l'un ou l'autre de ses côtés sur les dents du haut.
3. Aligner le bord de la bande le long des gencives et appuyer sur la bande pour la faire tenir en place.
4. Répéter l'opération sur les dents du bas.
5. La bande se dissout petit à petit, sans laisser de traces.
6. Utiliser une à deux fois par jour, selon les recommandations.

Temps de port recommandé :

La bande blanchissante se dissout en environ 15 minutes.

Bandes de blanchiment des dents White Dental Beauty

Les bandes White Dental Beauty sont un système de blanchiment à domicile, dispensé sous forme de bandes de blanchiment dissolubles.

FR.2

White Dental Beauty - PH 6 % équivalent

Ingrediénts : Pectine, PVP, glycerine, peroxyde d'hydrogène, eau, arôme (menthe poivrée), triphosphate pentasodique, hexamétaphosphate de sodium, polysorbate 80, sucralose, limonène, linalol, citronellol

Mises en garde :

1. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ces bandes blanchissantes.
2. À conserver hors de la chaleur / de la lumière directe du soleil. Ne pas congeler.
3. Les couronnes et les plombages ne répondent pas au traitement de blanchiment.
4. Ne pas fumer ou vapoter lors du blanchiment.
5. Si vous avez des questions concernant l'utilisation adéquate de ce produit, veuillez contacter votre dentiste dans les plus brefs délais.
6. Contient du peroxyde d'hydrogène.

Température de conservation entre 5 et 25 °C

FR.3

Avertissements


Produit destiné à être vendu uniquement à des dentistes. La première utilisation de chaque cycle d'utilisation doit être effectuée par des dentistes ou sous leur supervision directe pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit assuré. Le produit sera ensuite fourni au patient afin de poursuivre le cycle d'utilisation. L'utilisation de produits contenant des peroxydes n'est pas recommandée chez les patients de moins de 18 ans. Avertissements : Si vous présentez une irritation (telle que des rougeurs, des gonflements ou des douleurs) au niveau des gencives ou dans la bouche, arrêtez l'utilisation de ce produit et consulter un dentiste. L'utilisation de ce produit pour des périodes plus longues que 14 jours ne peut être effectuée que sous la supervision d'un dentiste. Évitez d'avaler la bande ou une partie de la bande. Évitez tout contact du produit avec les yeux. Évitez le contact direct de la surface active du produit de blanchiment des dents avec les gencives et/ou la salive.

AVERTISSEMENT :

H315 : provoque une irritation cutanée.
H317 : peut provoquer une allergie cutanée.
H318 : provoque des lésions oculaires graves.
H226 : liquide et vapeurs inflammables.
H400 : très毒ique pour les organismes aquatiques.
H411 : toxique pour la vie aquatique avec des effets durables.

FR.4

INSTRUCTIES VOOR DE PATIËNT

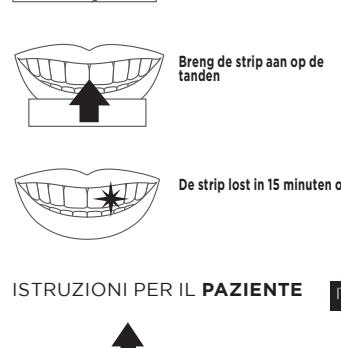

Gebruiksaanwijzing:

1. Gebruik de strip onmiddellijk na opening van het foliezakje.
2. Verwijder de strip en breng een zijde van de strip aan op de bovenanden.
3. Plaats de rand van de strip tegen het tandvlees aan en druk de strip op zijn plaats.
4. Herhaal dit voor de onderanden.
5. De strips losse geleidelijk op en laten geen resten achter.
6. Naar behoefte één- of tweemaal daags gebruiken.

Aanbevolen tijd voor het dragen:

De bleekstrip zal in ongeveer 15 minuten oplossen.

White Dental Beauty-tandbleekstrips

White Dental Beauty-strips zijn een bleeksystem voor thuisgebruik in de vorm van oplosbare bleekstrips.

NL.2

White Dental Beauty - overeenkomst met 6% HP

Ingrediënten: Pectine, PVP, Glycerine, Waterstofperoxide, Water (Aqua), Aroma (Peppermint), Pentanatriumtrifosfaat, Natriumhexametafosfaat, Polysorbita 80, Sucralose, Limonen, Linalool, Citronellol

Voorzorgsmaatregelen:

1. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven moeten vóór gebruik van de bleekstrips hun arts raadplegen.
2. Niet blootstellen aan directe hitte/direct zonlicht. Niet in de vriezer bewaren.
3. Vullen en kronen reageren niet op bleken.
4. Niet roken tijdens het bleken.
5. Raadpleeg uw tandarts zo spoedig mogelijk, mocht u vragen hebben over het gebruik van dit product.
6. Bevat waterstofperoxide

Bewaar temperatuur 5 - 25 °C

NL.3

Waarschuwingen


Het alleen verkocht worden aan tandheelkundigen. Bij elke gebruiksperiode mag het product de eerste keer alleen door tandheelkundigen worden gebruikt of onder hen direct toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gewaarborgd. Nadere aan de klant leveren om de gebruiksperiode te voltooien. Producten die peroxiden bevatten mogen niet bij kinderen jonger dan 18 jaar worden gebruikt. Waarschuwing: Als irritatie (bijvoorbeeld roodheid, zwelling, pijnlijkheid) van het tandvlees of mond optreedt, mag het product niet meer gebruiken en moet u een tandarts raadplegen. Het product mag alleen langer dan 14 dagen worden gebruikt onder toezicht van een tandarts. De strip of een deel ervan mag niet worden ingesteld. Het product mag niet in aanraking komen met de ogen. Het actieve oppervlak van het tandbleekproduct mag niet in directe aanraking met het tandvlees en/of de speekselstroom komen.

WAARSCHUWING

H315: veroorzaakt huidirritatie.
H317: kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: veroorzaakt ernstig oogletsel.
H226: ontvlambare vloeistof en damp.
H400: zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411: giftig voor in het water levende organismen met lange blijvende effecten

NL.4

ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

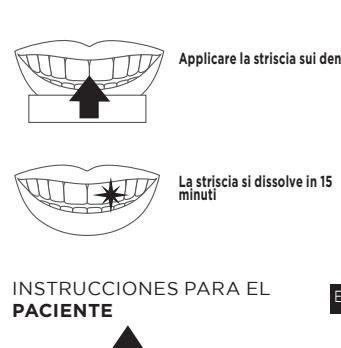

Istruzioni per l'uso:

1. Utilizzare la striscia immediatamente dopo l'apertura della busta in alluminio.
2. Rimuovere la striscia e applicarla su entrambi i lati dei denti superiori.
3. Allineare il bordo della striscia al bordo gengivale e premere la striscia in posizione.
4. Ripetere con i denti inferiori.
5. Le strisce si dissolvono gradualmente, senza lasciare residui.
6. Utilizzare una o due volte al giorno, secondo le necessità.

Tempo di applicazione raccomandato:

La striscia sbiancante si dissolve in circa 15 minuti.

Strisce sbiancanti per denti White Dental Beauty

White Dental Beauty è un sistema sbiancante per uso domestico, basato su strisce sbiancanti dissolubili.

IT.2

White Dental Beauty - Equivalente 6% HP

Ingredienti: Pectina, PVP, glicerina, perossido di idrogeno, acqua, aroma (menta piperita), trifosforato pentasodico, esametafosfato di sodio, polisorbato 80, sucralosa, limone, linalolo, citronello

Precauzioni:

1. Le donne in gravidanza e in allattamento devono consultare il proprio medico prima di utilizzare le strisce sbiancanti.
2. Tenere lontano dal calore diretto e dalla luce del sole.
3. Le otturazioni dentarie e le capsule non rispondono allo sbiancamento.
4. Non fumare né masticare prodotti a base di tabacco durante lo sbiancamento.
5. Per eventuali domande relative all'uso corretto di questo prodotto, consultare il proprio dentista il prima possibile.
6. Contiene perossido di idrogeno.


Temperatura di conservazione 5 - 25 °C

IT.3

Attenzione

Da vendersi solo a dentisti. Per ciascun ciclo, il primo uso

PASIENTINSTRUKSJONER

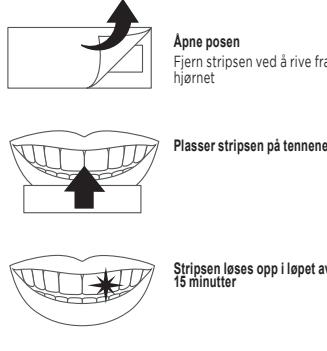


Bruksanvisning:

- Bruk stripsten umiddelbart etter åpning av folieposen.
 - Fjern stripsten og plasser en av sidene på de øvre tennene.
 - Sett kanten av stripsten på linje tannkjøttet og trykk stripsten på plads.
 - Gjenta for de nedre tennene.
 - Stripsten vil bli gradvis oppsløst slik at ingen rester er igjen.
 - Bruk én eller to ganger daglig etter behov.
- Anbefalt virketid:**
Tannblekingstripsten vil bli løst opp i løpet av omrent 15 minutter.
- White Dental Beauty tannblekingstripsten**
White Dental Beauty-stripsten er et tannblekingssystem til hjemmebruk som er påført på opploselige tannblekingstripsten.

NO.1

PATIENTANVISNINGAR

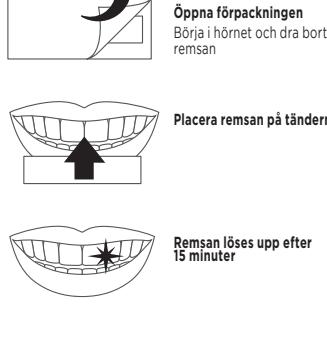

Bruksanvisning:

- Använd remsan direkt efter att du öppnat folieförpackningen.
 - Ta ut remsan och placera valfrida sidan av remsan på tänderna i överkäken.
 - Placer kanten av remsan i linje med tandköttslinjen och tryck fast remsan.
 - Upprepa proceduren i underkäken.
 - Remsan kommer att löses upp gradvis utan att nägra rester blir kvar.
 - Använd en eller två gånger om dagen efter behov.
- Rekommenderad användningstid:**
Blekningsremsan löses upp efter cirka 15 minuter.
- White Dental Beauty tannblekingssremser**
White Dental Beauty Strips är ett blekningsssystem för hemmabruk, där blekmedlet sitter på upplösbara blekningsremser.

SV.1

White Dental Beauty - motsvärande 6 % HP

- tilsvarende 6 % hydrogenperoksid**
- Ingredienser:** Pektin, PVP, glycerin, väteperoxid, hydrogenperoksid, vann, aroma (peppermint), pentanatriumtrifosfat, natriumhexametasofat, polysorbat 80, sukulose, limonen, linalool, citronellol
- Forholdsregler:**
- Gravide og ammende skal rādføre seg med lege før bruk av tannblekingstripsten.
 - Må holdes utenfor direkte varme/sollys.
 - Må ikke fryses.
 - Tannfyllinger og tannkrøner kan ikke blekes.
 - Bruk ikke tobakksprodukter mens du bleker tennene.
 - Hår du spørsmål angående riktig bruk av dette produktet, kontakt din tannlege så snart som mulig.
- Oppbevaringstemperatur 5-25 °C**

NO.3

Advarsler

Skal kun selges til tannleger. Første gang må tannblekingssmidetet kun brukes på tannlegekontor eller under direkte tannleggelse, såfremt dette skjer under helt trygge forhold. Deretter kan pasienten selv fortsette behandlingen hjemme. Bruk av peroksidholdige produkter er ikke anbefalt for barn under 18 år. Advarsler: Hvis det oppstår irritation (som rødt, opphiving eller sårhet) i tannkjøttet eller munnen, må du stanse bruken og rādføre deg med en tannlege. Stripsten eller deler av den må ikke svælges. Produktet må ikke komme i kontakt med øynene. Den aktive overflaten av tannblekingssmidetet må ikke komme i direkte kontakt med tannkjøttet og/eller spytstrømmen.

ADVARSEL

- H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H226: Brannfarlig vaské og damp.
H400: Mønst giftig for liv i vann.
H411: Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

NO.4

Varningar


Får endast säljas till praktiseringa tandläkare. Vid varje behandlingscykel ska den första omgången utföras av praktiseringa tandläkare under dess direkt överinseende om en likvärdig säkerhetsnivå kan fastställas. Därefter kan produkten ges till kunden som själv kan slutföra behandlingscykeln hemma. Produkter som innehåller peroxider rekommenderas inte för användning av barn under 18 års ålder. Varningar: Om irritation (till exempel rödhet, svullnad, ömhet) uppstår på tandsköttet eller munnen ska du sluta använda produkten och rådfråga en tandläkare. Användning av produkten under en period längre än 14 dagar ska endast ske under överinseende av en tandläkare. Undvik att sätta hela remsan eller en del av den. Undvik kontakt mellan produkten och ögat. Undvik direkt kontakt mellan tannblekningssmidetens aktiva yta och tandsköttet och/eller salivflödet.

VARNING

- H315: Orsakar hudirritation.
H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H226: Brandfarlig vätska och damp.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

SV.4

POKÝNY PRO PACIENTY

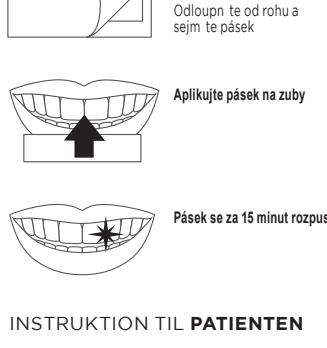

Návod k použití:

- Pásek je treba použít ihned po otevření obalové fólie.
 - Sejměte pásek a aplikujte libovolnou stranou na horní zuby.
 - Okraj pásku zarovnejte s linií dásní a přitlačte na místo.
 - Totéž opakujte pro dolní zuby.
 - Pásky se postupně rozpuští a nezanechají žádné stopy.
 - Používejte jednou nebo dvakrát denně dle potřeby.
- Doporučená doba trvání aplikace:**
Blekningsremsan löses upp efter cirka 15 minuter.
- Pásy k bělení Zubù White Dental Beauty**
Pásy White Dental Beauty jsou domácí systém bělení Zubù ve formě rozpustných bělících pásků.

CS.1

White Dental Beauty – odpovídá 6 % peroxidu vodíku

Složky: Pektin, PVP, glycerin, väteperoxid, voda, aroma (máta), trifosforečnan pentasodný, hexametafosforečnan sodný, polysorbat 80, sukulóza, limonen, linalool, citronellol

Bezepečnostní opatření:

- Těhotné a kojící ženy by se před použitím bělících pásků měly poradit se svým lékařem.
 - Nevystavujte přímému teplu/slnku. Nezmrazujte.
 - Plomby a korunky na bělení nereagují.
 - Během bělení nepoužívejte tabákové výrobky a nejezte.
 - Pokud máte jakékoli dotazy ohledně správného používání tohoto přípravku, zeptejte se co nejdříve svého Zubního lékaře.
 - Obsahuje peroxid vodíku.
- Uchovávání při teplotě 5–25 °C.**

CS.3

Varování


Určeno k prodeji pouze zubním lékařům. U každého cyklu použití je nutné první aplikaci provést zubním lékařem nebo pod jeho prvním dohledem, pokud bude zajištěna ekvivalentní úroveň bezpečnosti. Následně je připravek předán spotrebitelům do koncentrácií použití. Výrobky obsahující peroxid nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Upozornění: Pokud dojde k poškození dásní nebo úst (zbervenání, otoku, bolestivost), přestaňte výrobek používat a poradte se se svým zubním lékařem. Používání výrobku po dobu delší než 14 dnů je možné pouze pod dohledem zubního lékaře. Vyvarujte se polýkání pásku nebo jeho částí. Vyvarujte se kontaktu výrobku s očima. Vyvarujte se přímého kontaktu mezi aktivním povrchem produktu k bělení Zubù a/nebo sekrecí slin.

VAROVÁNÍ:

- H315: Dráždí kůži.
H317: Může způsobit alergickou reakci kůže.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H226: Horlavá tekutina a výparы.
H400: Vysoko toxický pro vodní organismy.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

CS.4

INSTUKTION TIL PATIENTEN

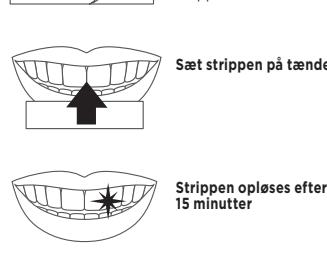

Brugsanvisning:

- Brug stripsten omgående efter åbning af folieposen.
- Fjern stripsten, og sæt hvilken som helst af siderne på de øvre tænder.
- Ret stripsten kant ind efter tandkødets kant, og pres stripsten på plads.
- Gentag for de nedre tænder.
- Stripsten oploses gradvist og efterlader ikke spor.
- Anvend én eller to gange dagligt efter behov.

Anbefalet brugstdid:

Blekningsstripsten oploses efter ca. 15 minutter.

White Dental Beauty-strips til bleknings af tæder

White Dental Beauty-strips er en blekningsmetode til hjemmebrug med oploselige blekningsstripsten.

DA.1

White Dental Beauty - 6 % HP-tilsvarende

Ingredienser: Pektin, PVP, glycerin, hydrogenperoxid, vand, aroma (peppermint), pentanatriumtrifosfat, natriumhexametasofat, polysorbat 80, sukulose, limonen, linalool, citronellol

Forholdsregler:

- Gravide og ammende skal rādføre seg med lege før bruk av blekningsstripsten.
 - Må ikke utsættes for direkte varme/sollys. Tåler ikke frysning.
 - Fyldninger og kroner påvirkes ikke af blekgemidlet.
 - Undlad at bruge tobaksprodukter under blekningen.
 - Hvis du har spørsmål til behandlingen, bedes du kontakte din tandlæge så hurtigt som muligt.
 - Indeholder hydrogenperoxid
- Opbevaringstemperatur 5-25 °C**

DA.3

Advarsler

Ma kun sælges til tandlæger. Til hver brugsyklus må den første brug kun udføres af tandlæger eller under deres direkte overinseende om en likvärdig sikkerhetsniveau er etableret. Udleveres deretter til forbrugeren med henblik på gennemførelse af brugsyklussen. Produkter, der indeholder peroxider, anbefales ikke til brug af børn under 18 år. Advarsler: Hvis det opstår irritation (som rødt, rømme, omhed) upstår på tandsköttet eller munnen skal du stoppe med at anvende produkten og rådfra en tandlæge. Undgå at sluge stripsten eller en del af den. Undgå, at produkten kommer i kontakt med øjnene. Undgå, at tannblekningssmidetens aktive overflade kommer i direkte kontakt med gummerne og/eller spyt.

ADVARSEL

- H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage en hudallergisk reaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H226: Brandfarlig vætske og damp.
H400: Mycket giftigt for vattenlevande organismer
H411: Giftigt for vattenlevande organismer med langvarige virkninger.

DA.4

تحذيرات

يتم بيعه فقط لممارسي طب الأسنان.

ممارس طب الأسنان أو تختى الممارس المنشئ حال ضمان مستوى معايير من السلامة. بعد ذلك يتم توفيره للمسنون إكمال دوره الاستخدام.

لا يوصى باستخدام المنتجات التي تحتوي على مركبات البروبيكيد بروبيكيد الأقل من 18 عاماً.

تحذيرات: حال حدوث تهيج (مثل: الاحمرار، التورم، التقرّح)

في اللثة أو الفم، توقف عن الاستخدام واستشر طبيب الأسنان.

لا يجب استخدام المنتج لفترة تزيد على 14 يوماً إلا تحت إشراف طبيب الأسنان.

تجنب ابتلاع الشريط أو أي جزء منه.

تجنب ملامسة سطح منتج تبييض الأسنان النشط بشكل مباشر للثة أو دفعه إلى العاب.

تحذير: H315: يسبب تهيج البشرة.

H317: قد يسبب رد فعل حساسية بالبشرة.

H318: سائل وذرة قابلان للأشتعال.

H226: شديد السمية للأحياء المائية.

H400: ويسهب تأثيرات طوبينة الامد.

H410: ويسهب تأثيرات طوبينة الامد.

AR.4

الاحتياطات: 4. كرر الخطوات لأسنان السفلية .

5. سترrip الشراطئ تكريبيجاً، دون ترك أي روابط.

6. استخدم الشراطئ مرةً أو مررتين يومياً حسب الحاجة.

مدة الاستعمال الموصى بها:

ستربrip شريط تبييض الأسنان في غضون 15 دقيقة تقريباً.

شراطئ تبييض الأسنان من White Dental Beauty

تُعد شرطة تبييض الأسنان المنشئ قابلة للذوبان في المنزل، ويتم صرفه على هيئة شرطة تبييض قابلة للذوبان.


مكونات بيروكسيد البيروكجين

- White Dental Beauty 6%.

المكونات: بكتين، بولي فينيل برولون، جلسين، بيروكسيد البيروكجين، ماء، نكهة (عنان)، ثلاثي فوسفات الصوديوم، الحمامي، بنسامي ميماقوسفات الصوديوم، بولي سوربات 80، سكر الوز،ليمونين، لينالول، سترونيلول.

AR.3

تعليمات المريض



الاحتياطات: 1. يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب.

2. قبل استخدام شرطة تبييض الأسنان استشارة الطبيب.

التحذيم:

3. لا تناشر شرطة الأسنان والتجانج تبييض الأسنان.

4. إذا كانت لديك أي آمنة تخصص من الاستخدام لهذا المنتج، فرجحى استشارة طبيب الأسنان في أقرب وقت ممكن.

5. ينوي على بيروكسيد البيروكجين درجة حرارة التفريز -5 °C مئوية

طبلات الاستخدام:

1. استخدم الشرطة فوراً بعد فتح كيس التصدير.

2. أزل الشرطة ووضعه من أحد الوهبين على الأسنان العلوية.

3. قم بمحاذاة طرف الشرطة مع خط اللثة واضغط على الشرطة في مكانه.

AR.1



فتح الكيس اخرج من الطرف وأزل الشرطة

اربع من الشرطة على الأسنان

ضع الشرطة على الأس